



Máquina de anestesia WATO EX-35

NUEVA

Rendimiento excepcional

mindray
healthcare within reach

Desde 2006, Mindray ha instalado exitosamente más de 20 000 unidades de máquinas de anestesia para clientes de todo el mundo y ha satisfecho ampliamente las expectativas de los usuarios. Mindray se enorgullece enormemente por saber que cada minuto, en algún lugar del mundo, un médico enciende una máquina de anestesia Mindray y la utiliza con absoluta confianza y satisfacción. Durante los últimos diez años, Mindray ha trabajado continuamente de cerca con médicos de todo el mundo para reconocer y comprender los desafíos clínicos que ellos enfrentan todos los días, y los ha ayudado a resolverlos poniendo a su alcance soluciones intuitivas e innovadoras. Con este objetivo en mente, Mindray se complace en presentar la nueva versión mejorada WATO EX-35, con funciones avanzadas y nuevo diseño y funcionalidad para 2016.



WATO EX-35

NUEVA

Rendimiento excepcional



Control desde su nueva pantalla táctil

Presenta una pantalla táctil de 10,4" con controles de parámetros de rápido acceso y un sencillo diseño de menú. La nueva interfaz del usuario de WATO EX-35 le permite al usuario modificar el modo de ventilación y los ajustes del monitor más fácilmente que nunca en este nivel de productos.

El nuevo sistema táctil de alarma inteligente brinda información detallada en tiempo real que alerta con rapidez y claridad al médico sobre la existencia de situaciones adversas y destaca la necesidad de interacción y resolución inmediata.

Rendimiento mejorado

La nueva WATO EX-35 emplea la tecnología más reciente y ofrece una gran cantidad de funciones y funcionalidad, lo que garantiza que todos los procedimientos anestésicos se realicen de forma efectiva, segura y eficiente.

Entre otras funciones mejoradas, se incluyen las siguientes:

Módulo AG integrado tipo Plug-and-play (autoidentificación de 5 agentes y N₂O)

Ventilador integrado con modos múltiples que ofrece modos controlados de ventilación asistida

La nueva y única función de cambio automático de gases impulsados por el ventilador (Ventilator Driven Gas Auto Switch) de Mindray, que garantiza que el paciente reciba ventilación de forma ininterrumpida en todo momento.

Uso más sencillo

Diseño pensado en función del usuario

La nueva EX-35 se ha diseñado para simplificar su trabajo. Es un completo sistema de anestesia diseñado ergonómicamente que se puede posicionar y utilizar durante periodos prolongados con comodidad, sin experimentar cansancio o tensión innecesarios.



Control desde su nueva pantalla táctil

Pantalla táctil, ajustes más sencillos

La nueva WATO EX-35 emplea una pantalla táctil de 10,4" de alta resolución que muestra hasta 3 formas de ondas de ventilación (EtCO₂, presión, flujo y volumen), curva de espirometría y control completo de gases, y permite, además, el acceso directo a todos los ajustes y controles de parámetros.

La nueva estructura tabular y sencilla del menú con control táctil resulta una ventaja a nivel global para los dispositivos de este tipo actualmente disponibles en el mercado.

Administración táctil de la función de alarma inteligente

El nuevo sistema de administración de la función de alarma inteligente brinda información detallada en tiempo real que alerta de forma clara e inmediata al médico acerca de la existencia de situaciones adversas y permite su posible resolución temprana.

El registro completo de alarmas incluye un registro de alarmas que el usuario puede configurar y que muestra lo siguiente:

- información de alarma física que muestra una imagen del parámetro y
- alarmas técnicas que utilizan un software de diagnóstico que ofrece las posibles causas de las alarmas y que puede brindar asistencia en la resolución inmediata de la situación.





Uso más sencillo

Con sus mangos convenientemente ubicados y sus ruedas giratorias, la nueva WATO EX-65 se puede posicionar fácilmente sin esfuerzo dentro del lugar de trabajo. Su amplia superficie de trabajo, que permite tomar notas y colocar medicamentos o equipos de intubación, y su apoyapiés ergonómicamente diseñado le ofrecen al usuario la comodidad total que necesita para los casos más prolongados.





Rendimiento mejorado

Nuevo control de gases P-n-P

Nuestro módulo mejorado de CO₂ de ranura simple tipo Plug-and-play o el módulo de agentes anestésicos de ranura doble brindan un análisis visual completo de respiración a respiración FiO₂, EtO₂, CO₂, N₂O y permiten la autodetección de 5 agentes anestésicos. Además, los módulos se pueden trasladar fácilmente entre monitores y dispositivos anestésicos Mindray con funciones similares, lo que optimiza la configuración y la flexibilidad de los dispositivos para que se adapten mejor a sus necesidades.

Cambio automático de gases impulsados por el ventilador


La seguridad del paciente es lo primordial en todos los dispositivos de Mindray, y la nueva WATO EX-35 no es la excepción. La nueva función de cambio automático de gases impulsados por el ventilador asegura que el paciente sea ventilado mecánicamente en todo momento, aun cuando falle el suministro de gases del ventilador primario.





Ventilador de alto rendimiento

La nueva WATO EX-35 permite una completa gama de modos controlados de ventilación asistida y debido a la compensación dinámica del volumen corriente, desde niveles tan bajos como Tve 20 ml, resulta apto para todas las categorías de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos.

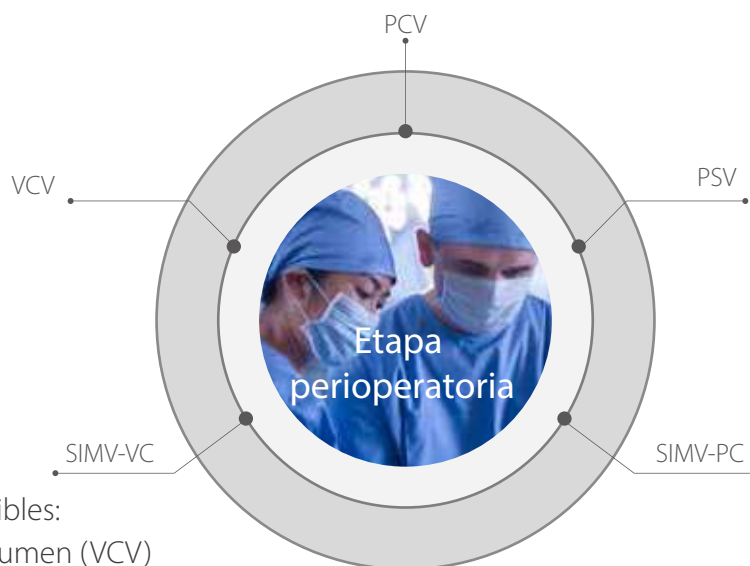

Modos de ventilación disponibles:

Ventilación controlada de volumen (VCV)

Ventilación de presión controlada (PCV)

Ventilación de soporte de presión + ventilación por apnea (PSV + ventilación por apnea)

Ventilación obligatoria intermitente sincronizada - VC (SIMV-VC)

Ventilación obligatoria intermitente sincronizada - PC (SIMV-PC)

The materials and information provided via this brochure are distributed internationally, but not all the products or services found on this brochure are necessarily available in your country or area. Please contact local office or agents to make sure of the availability of the relevant products or services.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 392-37401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Goebelstrasse 21, 3. OG, 64293 Darmstadt
Voice: (49 6151) 3910 0
Fax: (49 6151) 3910 300

Mindray (UK) Limited

Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park,
Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121

Mindray Medical Rus Co.Ltd

2 Zvenigorodskaya Street, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP
CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (55-21) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate,Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3,
Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,
400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTı MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT.
D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara

TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A
ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.Ltd.


Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park,
102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road,
Kwaeng Bangkokkapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

Mindray Medical Korea

KNI Tower 9F 823-19 Yeoksam dong, Seoul-ganum, Korea
Tel: 008225688040
Fax: 008225688042

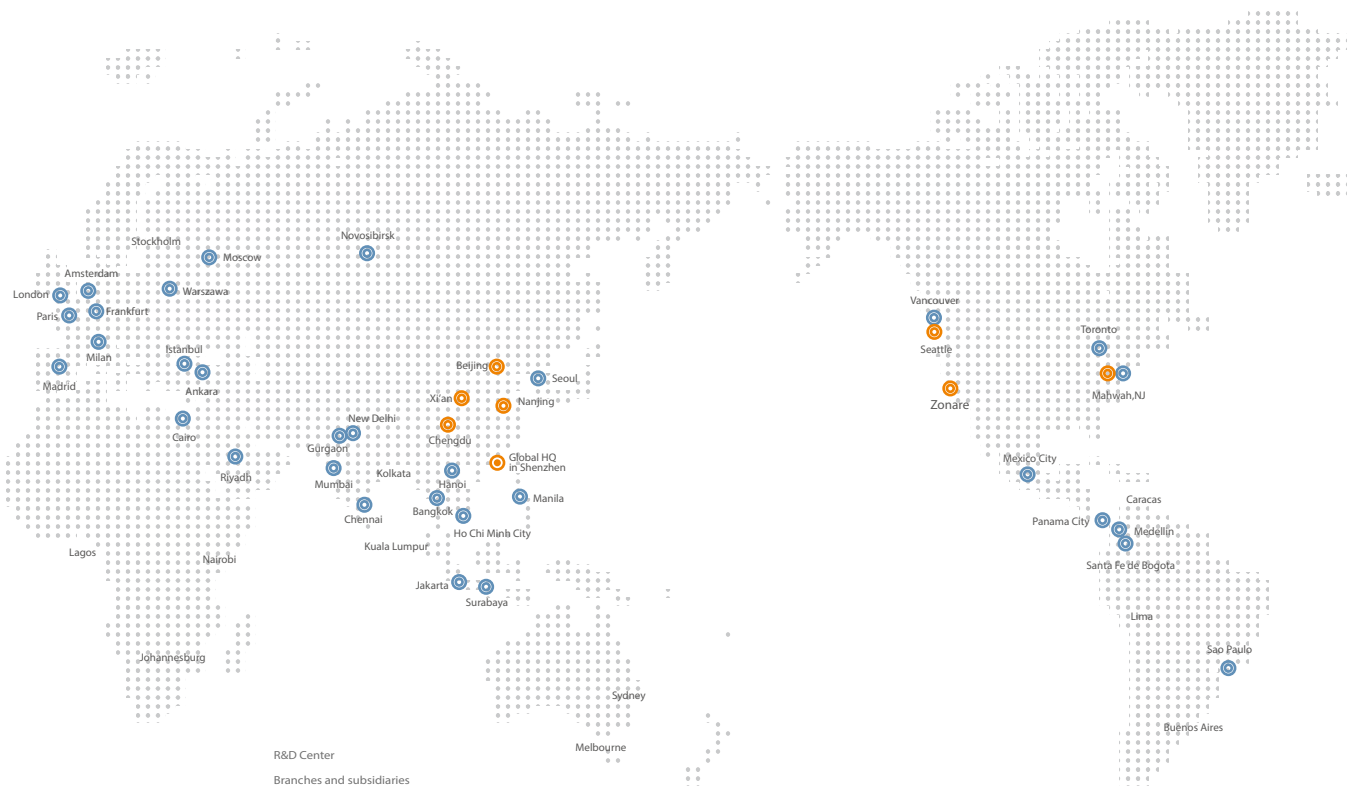

mindray