



# OLM9550 LED

Lámpara quirúrgica móvil



# OLM9550 LED

## Lámpara quirúrgica móvil

### Rendimiento

El OLM9550 tiene 10 LED de color para iluminación auxiliar, incluido el modo endoscópico (luz verde), y 70 LED de alta luz para iluminación normal.

### Seguridad

Pantalla de energía de respaldo en tiempo real, fácil de conocer la energía restante antes de usar.

Cada dispositivo está equipado con 2 mangos desmontables y esterilizables, fáciles de reemplazar y convenientes para esterilizar.

### Claridad


El alto índice de reproducción cromática facilita al ojo la distinción entre diferentes tejidos, mejorando la experiencia visual y retrasando la fatiga visual.

El diseño de espacio de iluminación largo puede iluminar claramente la superficie y la profundidad del campo quirúrgico, sin necesidad de ajustar la posición de la lámpara durante la operación.

### Conveniencia

En general, la estructura es sencilla y clara.

La distancia entre 4 ejes antiestática y con frenos puede moverse libremente y mantener un centro de gravedad suave.

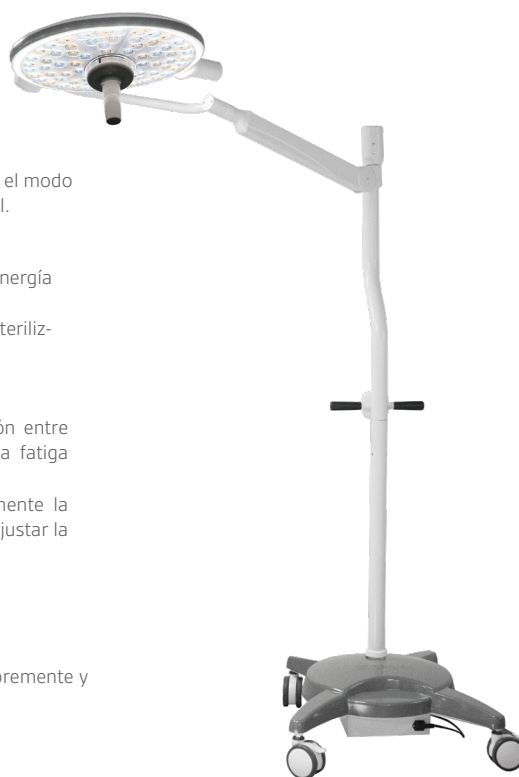

### Especificaciones técnicas

Diámetro de las luces (mm)	500
Iluminación a 1 m (Lux)	40,000-160,000
Intensidad de luz ambiental (Lux)	≤500
Temperatura de color (K)	Estándar: 4,500 Opcional: 3,000-6,000
Diámetro del campo de luz (D10, mm)	Estándar: 200 Opcional: 160-200
Índice de reproducción cromática (Ra)	98
Índice de reproducción cromática (R9)	98
Índice de reproducción cromática (R13)	98
Índice de reproducción cromática (R15)	98
Profundidad de la iluminación L1 + L2 (20%, mm)	1,650±25%
Profundidad de la iluminación L1 + L2 (60%, mm)	850±25%
Número de bombillas LED	70
Vida útil de las bombillas LED (h)	≥70,000
Rango de atenuación	Nivel 10 (25% - 100%)



### Sede corporativa

#### HEYER Medical AG

Carl-Heyer-Str. 1/3, 56130 Bad Ems, Alemania

Tel.: +49 2603 791 0

Fax: +49 2603 791 200

info@heyarmed.com

www.heyarmed.com

### Fabricante

#### HEYER Medical Co., Ltd.

No. 10, Calle Chaobai, Zona de Desarrollo de Yanjiao, 065201, Ciudad de Sanhe, Hebei, China

Tel.: +86 10 5841 1198

Fax: +86 10 6371 8989

marketing@heyarmed.com