

Especificaciones

| | |
|---|----------------|
| Longitud de mesa (mm) | 2080 |
| Ancho (Sin barandillas laterales, mm) | 520 |
| Altura (Sin colchón quirúrgico, mm) | 650 - 1000 |
| Trendelenburg/ Inversa | 30°/30° |
| Inclinado izquierdo y derecho | 20°/20° |
| Elevación o descenso de la placa de respaldo | 80°/45° |
| Elevación o descenso de la placa de cabeza | 30°/45° |
| Elevación o descenso de la placa apoyapiernas | 20°/90° |
| Inclinación lateral de la placa apoyapiernas | 180° |
| Flexionada y cóncava | 225° / 110° |
| Elevación del elevador del tronco (mm) | 128 |
| Longitudinalmente (mm) | 300 (Opcional) |
| Carga máxima (kg) | 350 |
| Intercambio de cabecera y pierna | Sí |
| Posición 0 | Sí |



Sede corporativa
HEYER Medical AG
 Carl-Heyer-Str. 1/3, 56130 Bad Ems, Alemania
 Tel.: +49 2603 791 0
 Fax: +49 2603 791 200
 info@heyarmed.com
 www.heyarmed.com

Fabricante
HEYER Medical Co., Ltd.
 No. 10, Calle Chaobai, Zona de Desarrollo de
 Yanjiao, 065201, Ciudad de Sanhe, Hebei, China
 Tel.: +86 10 5841 1198
 Fax: +86 10 6371 8989
 marketing@heyarmed.com

Cata/es - OP850-2025.07



OP850

Mesa quirúrgica eléctrica



La serie OP850 de camillas quirúrgicas eléctricas hidráulicas es una innovadora mesa de operaciones móvil diseñada específicamente para la cirugía moderna. Este equipo cuenta con un sistema de accionamiento hidráulico inteligente y una estructura compuesta de acero inoxidable 304, con una capacidad de carga estándar de hasta 350 kilogramos (superior al estándar de la industria).



① Seleccionamos materiales de alta calidad.

- Carcasa desinfectable fabricada en acero inoxidable 304.
- Interruptores hidráulicos de alta sensibilidad que garantizan movimientos precisos y ágiles.




② Puente renal incorporado con elevador

- Puente renal radiotransparente integrado que facilita eficientemente las cirugías de riñón y vesícula biliar.




③ Imágenes de Rayos X Óptimas

- Placas radiotransparentes de alta calidad para diagnóstico preciso.
- Secciones Intercambiables: Diseño modular para adaptarse a diferentes necesidades quirúrgicas.
- Desplazamiento Longitudinal (Opcional): Hasta 300 mm para mayor precisión en posicionamiento.

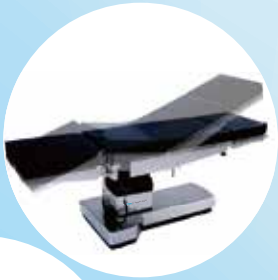

④ Configuración Quirúrgica

- Reinicio Rápido: Botón de reinicio en un solo clic para preparar el quirófano en segundos.
- Posiciones Flex y Reflex: Diseñadas para procedimientos específicos con ajustes precisos.
- Ajuste Flexible del Paciente: Compatible con accesorios opcionales para múltiples tipos de cirugía.

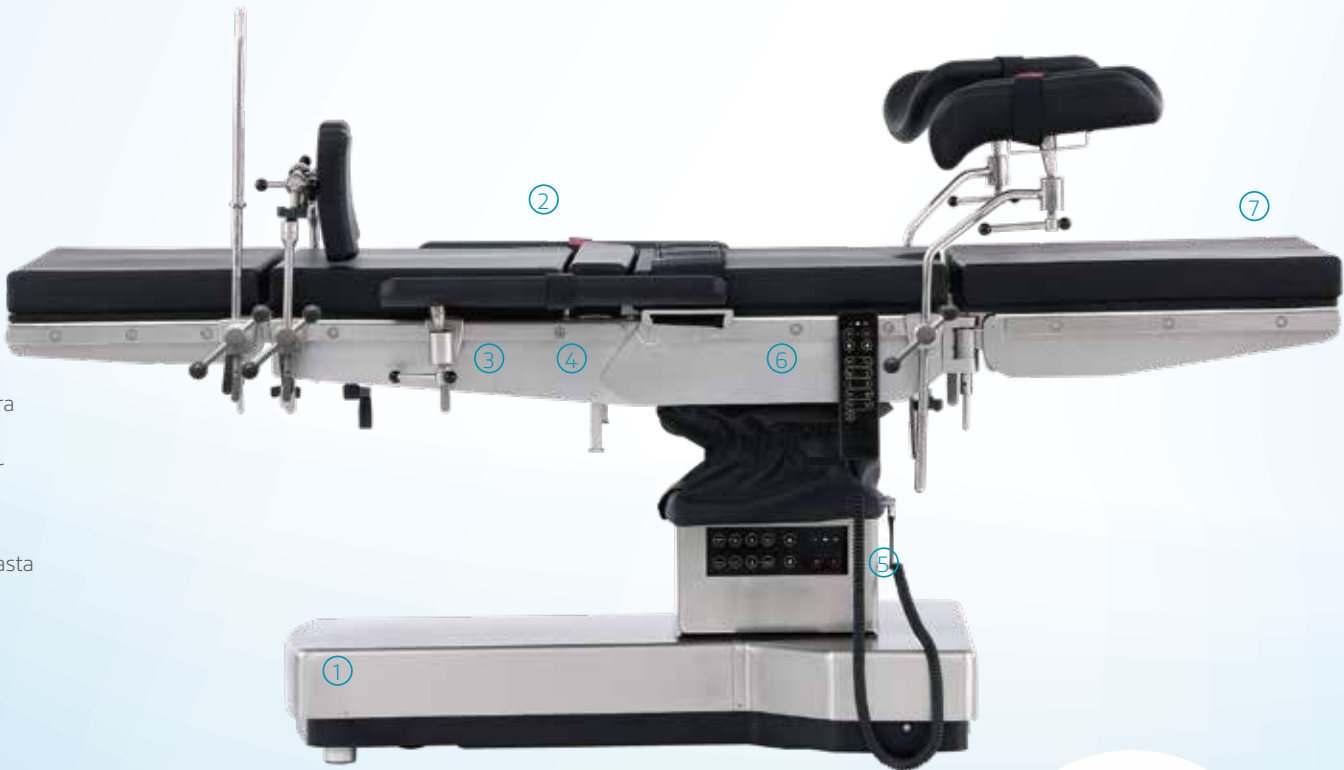

⑤ Ergonomía

- Ajuste cómodo: Posiciones de piernas/cabeza ajustables con un solo movimiento.
- Movimiento fluido: Muelles de gas importados para precisión en posicionamiento.
- Altura regulable: Base en T y gran rango de altura para comodidad quirúrgica.



⑥ Seguridad

- Bloqueo automático: Fija automáticamente la mesa tras ajustes, evitando errores.
- Doble control: Panel remoto y consola de columna funcionan independientemente. Si uno falla, el otro sigue operativo.
- Sistema inteligente: Apaga el panel tras 1 minuto sin uso, previniendo errores.



⑦ Cojines

- Espuma viscoelástica de alta densidad con textura suave para prevenir úlceras por presión.