

GENERALIDADES

Luvar E Series

Cuidamos tu respiración

- 12 funciones de detección interconectadas
- Control de temperatura y humedad de doble núcleo
- Diseño doméstico estético
- Interacción inteligente



Escanea el código QR para acceder en línea a toda la información.
www.heyermedical.de



Adaptable a todo tipo de mascarillas



LuvOn Máscara facial completa



LuvOn Máscara nasal



LuvOn P1 Máscara de almohadillas nasales

Accesorios estándar



Adaptador de corriente



Cable de alimentación



Filtro de aire



TUBO NORMAL 19 mm



Tarjeta SD



Manual de usuario



Bolsa de transporte

Accesorios opcionales



TUBO CALEFACTOR1 5 mm



tubo normal 15 mm



Celular + Bluetooth



WIFI + Bluetooth

Desarrollado en Alemania

La Serie Luvar E, al igual que todos los demás dispositivos de Heyer Medical AG, es desarrollada por ingenieros altamente cualificados y experimentados que emplean los últimos estándares de desarrollo. La fabricación de esta serie cumple estrictamente con normativas de calidad rigurosas



Sede Central
Heyer Medical AG

Carl-Heyer-Str. 1/3, 56130 Bad Embs, Alemania
Tel: +49 2603 791 222
Fax: +49 2603 791 200
marketing@heyermid.com
www.heyermidical.de

Serie Luvar E - V1.2 202507ES



Luvar E Series

Luvar E Series

Control preciso e inteligente para cada respiración comfortable.



HOMECARE


www.heyermidical.de



Impulsado por doble núcleo, Humidificación Inteligente y Ramp: Protección de la Salud Mejorada


CareHumi

El sistema CPAP ajusta inteligentemente los niveles de temperatura y humedad para emitir un flujo de aire con 90% de HR en respuesta a las variaciones de temperatura ambiental, humedad y flujo de aire del paciente, garantizando confort durante la respiración

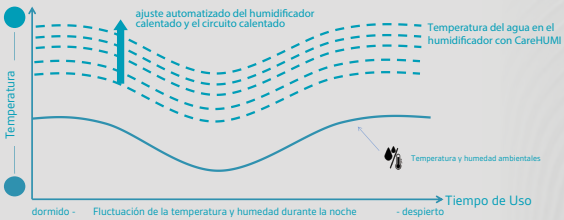

CareRamp

La presión inicial comienza en 4 cmH2O y aumenta lenta e inteligentemente para evitar la sensación de "asfixia" en los usuarios primerizos (la presión aumenta 0,1 cmH2O cada 6 segundos; después de detectar que el usuario se ha dormido, la presión aumenta de forma estable).

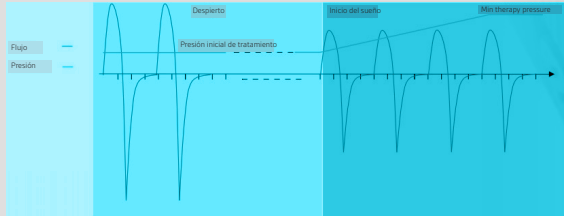

Inicio a un click

Monitoreo colaborativo multidimensional mediante sensores

- 12 funciones de detección interconectadas
- Monitoreo ambiental con retroalimentación en tiempo real sobre los cambios del entorno
- Seguimiento del ciclo respiratorio para capturar con precisión las ondas respiratorias
- Garantía de estabilidad del sistema para prevenir fluctuaciones anormales



Un gestor de salud respiratoria que se integra en el dormitorio como un altavoz inteligente

AS-Elex

Hace que cada exhalación sea más cómodaMejora la comodidad respiratoria al disminuir automáticamente la presión espiratoria

AS-Dry

Circulación de aire a baja velocidad durante 30 minutos después del tratamiento, reduciendo la humedad residual en un 80%.

Auto On/Off

Se enciende inmediatamente al ponérselo, y el tratamiento se detiene al quitárselo (con doble sensor que detecta flujo de aire y presión).

Air Filter

Material de mascarilla de grado médico, sin polvo y con tratamiento antibacteriano, sin olores para uso prolongado; Proceso de sellado prensado en caliente para mayor durabilidad.

Perilla

Diseño ergonómico con amortiguación validada por miles de pruebas, que garantiza un funcionamiento fluido y una sensación comfortable.

Diseño de estilo doméstico

Cuerpo redondeado para suavizar la sensación clínica de los dispositivos médicos.



Interconexión inteligente, control en tiempo real de los datos del dispositivo CPAP a través de la APP y la plataforma en la nube, ¡la salud está en tus manos!

	20A Pro						
	BV30ST Pro						
	CPAP	Auto CPAP	Auto S	S	S/T	T	VGP5
Presión de inicio 4-20cmH ₂ O	●	●	●	●	●	●	●
Presión de tratamiento 4-20cmH ₂ O	●						
EPAP 4-25cmH ₂ O			●	●	●	●	●
IPAP Max 6-30cmH ₂ O			●				●
IPAP Min 6-30cmH ₂ O			●				●
IPAP 6-30cmH ₂ O				●	●	●	
RR 5-40BPM					●	●	●
Ti 0.3-4s					●	●	●
Ti Min 0.5-4s			●	●	●		●
Ti Max 1-4s			●	●	●		●
Tiempo de subida 1-6			●	●	●	●	●
Disparador y ciclo 1-6			●	●	●		●
Objetivo VT 200-1500ml							●
Ventilación de respaldo				●			
Titulación manual	●	●					
AS-Elex Paciente ON/OFF	●	●	●	●	●	●	●
Nivel AS-Elex OFF /1-7	●	●	●	●	●	●	●
Alerta de fuga ON/OFF	●	●	●	●	●	●	●
Ramp Ti OFF/0-60min/Auto	●	●	●	●	●	●	●
Nivel de humedad OFF/1-5/Auto	●	●	●	●	●	●	●

Basado en 24 años de algoritmos de ventilación: Medical-grade Calibration Standards, Accurate a 0.1 cmH2O

- Precisión de tratamiento comparable a la de ventiladores hospitalarios
- Generates personalized respiratory health reports (e.g., trend analysis de obstructive events)

Soluciones eficientes de transmisión de datos
SD/Celular + Bluetooth / Wi-Fi + Bluetooth

Depósito de agua de amplia apertura
Fácil de limpiar y llenar de agua; diseño a prueba de errores con bajo riesgo de instalación incorrecta

Activación con un solo botón

Noise Level
25.5dB

Preheat Function
Calentamiento con un solo botón 30 minutos antes de dormir para evitar la irritación por aire frío



Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.heyermedical.de